



ACUNEX® VARIQORIC

DIE **EDOF** - IOL MIT ASTIGMATISMUS-KORREKTUR

## ACUNEX® VARICTORIC MIT ASTIGMATISMUS KORREKTUR



50%

der Patienten haben keinen Astigmatismus

## **SEHEINDRUCK**

ohne Hornhautverkrümmung



E

**50**%

der Patienten benötigen mehr

ACUNEX<sup>®</sup> Variq<sub>oric</sub>

## **SEHEINDRUCK**


mit Hornhautverkrümmung



Mit der torischen EDoF-IOL ACUNEX® VARIQUICE haben Sie die Möglichkeit Astigmatismus im Zuge einer Kataraktbehandlung mühelos zu korrigieren. Standardzylinder TO - T3 (0,75 dpt bis 3,00 dpt in 0,75 dpt Schritten) erhältlich.



Einteilige torische Hinterkammerlinse für erweiterte Tiefenschärfe und optimales Kontrastsehen mit asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter

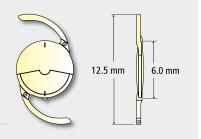

Produkt	ACUNEX® VARIOTORIC ANGVT	Asphärisch
		EDoF
Тур	Faltbare einteilige torische EDoF-IOL zur Kapselsackfixierung	Blaulichtfilter
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Glistening-frei
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	Standard-torisch
Haptikanwinkelung	Oº	Standard-tonson
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +1,5 D Asphärische und torische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 D bis +30,0 D (0,5 D) zyl.: TO +0,75 D  T1 +1,5 D  T2 +2,25 D  T3 +3,0 D	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gamma-Sterilisierung	
Lagerung	Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	
Empfohlene Inzisionsgröße	≥ 2,0 mm	

HERSTELLER:



