

TELEON[®]

NEWS

DOC, Sommer 2021



Inhalt

1. Save the Date: **Teleon LIVE-Symposium im Rahmen der DOC**
2. **Teleon-Videoserie:** „Of Diamonds and Premium-IOLs“
3. **LAUNCH der FEMTIS[®] Mplus & FEMTIS[®] Mplus Toric:** Neuvorstellung im 3. Quartal 2021
4. **Teleon's IOL-Konfigurator:** Update 2021
5. **ACUNEX[®] VARIO TORIC:** Die EDoF-IOL mit Astigmatismuskorrektur
6. **LENSAR, Sophi, Tixel und ZEPTO:**
Hightech-Geräte zur Perfektionierung Ihrer täglichen OP-Prozeduren

Veranstaltung

Save the Date:

Verpassen Sie nicht unser Teleon LIVE-Symposium im Rahmen der DOC

DAS ABC DER REFRAKTIVEN KATARAKTCHIRURGIE

Dr. Laszlo Kiraly

Premiumdiagnostik für perfekte refraktive Ergebnisse

Dr. Florian Kretz

Premium-Technik für Premium-Patienten: LENSAR & sophi

Dr. Detlev Breyer

LENTIS® Comfort und ACUNEX® Vario – Viel Freude wenig Ärger

Dr. Detlef Holland

Bewährte Optik in neuem Gewand – Die FEMTIS® MIOL Familie

Freitag 18.06.2021, um 17:00 – 18:00 Uhr


Login und Registrierungsinformationen werden wir auf unserer Website und LinkedIn zeitnah kommunizieren.



Dr. Laszlo Kiraly



Dr. Florian Kretz

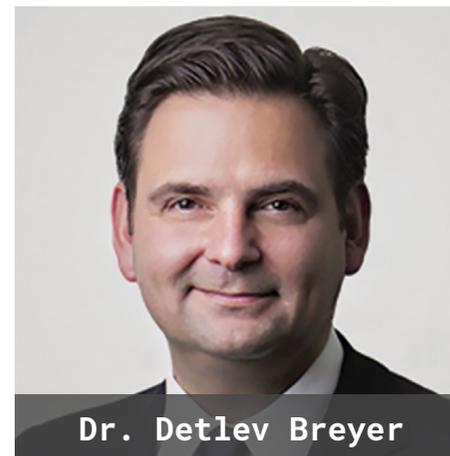

Dr. Detlev Breyer



Dr. Detlef Holland

Social Media

Experten präsentieren ihr Wissen über Premium-IOLs in 5 Episoden

Wie Diamanten, sind Premium-IOLs von höchster Qualität – und Klarheit. Eine Bildungsvideoserie der etwas anderen Art haben wir zusammen mit dem CAKE-Magazin des Media MICE Verlages produziert. Die Serie enthüllt die spannenden Ähnlichkeiten zwischen den kostbaren Edelsteinen und unseren erstklassigen Intraokularlinsen.

Unser Dank gilt Dr. Detlev R. H. Breyer, Dr. Jorge L. Alió, Dr. John Chang, Dr. Alan Koh und Dr. Patrick Versace für die Mitwirkung.

Die einzelnen Episoden werden wir auf unserem Youtubekanal in regelmäßigen Abständen veröffentlichen. Schauen Sie einfach rein.

[Youtube-Trailer](#) | [Episode 1](#) | [Episode 2](#)

Weitere Episoden folgen! Diese und weitere Neuigkeiten posten wir auch regelmäßig auf unserem LinkedIn Channel:

[Folgen Sie uns auf LinkedIn](#)

Of Diamonds and Premium IOLs

An educational video series supported by **TELEON®**

Coming Soon!

MATT YOUNG
HOST

DR. DETLEV BREYER
GERMANY

DR. JORGE ALIO
SPAIN

DR. JOHN CHANG
HONG KONG

DR. ALAN KOH
MALAYSIA

DR. PATRICK VERSACE
AUSTRALIA

LINKEDIN YOUTUBE

The graphic features a black background with white diamond and starburst patterns. It includes six hexagonal video thumbnails of the experts, each with their name and location. At the bottom, there are QR codes for LinkedIn and YouTube.

Neu - Produktvorstellung

FEMTIS® Mplus & FEMTIS® Mplus^{toric}

Perfekte refraktive Ergebnisse bei der Korrektur von Presbyopie und Astigmatismus



Das einzigartige Haptikdesign der rhexisfixierten FEMTIS IOL Family ermöglicht höchste Präzision im kombinierten Einsatz mit automatisierten Kapsulotomien, wie sie durch moderne Lasersysteme wie dem LENSAR möglich sind. Die perfekte Zentrierung der IOL auf der optischen Achse sowie die sehr hohe Rotationsstabilität, sind optimale Voraussetzungen für eine präzise und optimierte Korrektur refraktiver Sehfehler.

Mplus-Technologie bei Presbyopie

- Großflächige Fernoptikzone
- Stufenfreie Zentraloptik
- Refraktives Segment für kontinuierliches Sehen in allen Entfernungen (Varifokaleffekt)
- Maximale Lichtausbeute für exzellenten Visus und Kontrast


Großflächige, asphärische Fernoptikzone mit maximaler Lichtfokussierung für einen scharfen Fernbereich

Zentrales Fern-Lenslet für mehr Sicherheit gegenüber IOL-Dezentrierung und -verkipfung

Sanfte trans-mediale Übergänge für max. Lichtausnutzung und minimierte photische Nebenwirkungen

Prolates Flächenprofil zwischen Fern-Lenslet und Gleitsichtsegment für einen stufenlosen Stärkenübergang

Segment mit Gleitsichteffekt durch varifokale Addition für ein brillantes Sehen in allen Entfernungen

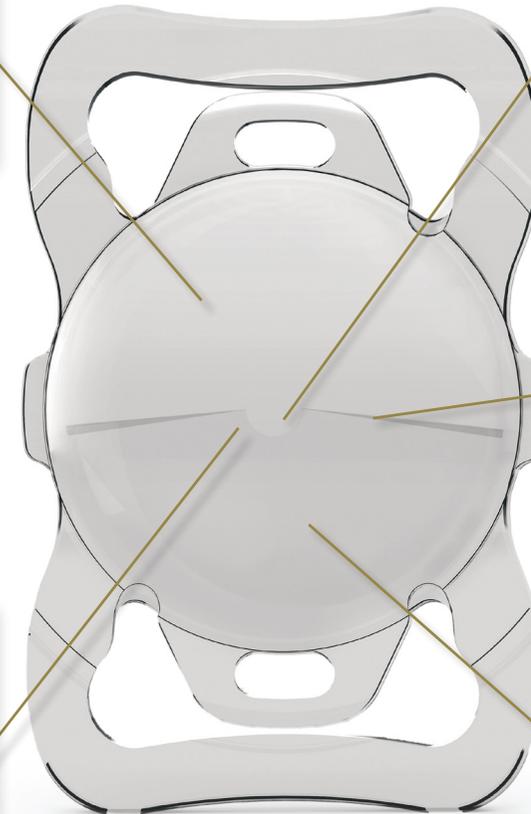

Neu - Produktvorstellung (2)

FEMTIS® M_{plus}

Bewährtes Optiksystem für alle Entfernungen



Nähe

Intermediär


Ferne

- Ausbalanciertes Sehprofil für alle Entfernungen
- Die universale MIOL für den aktiven Lebensstil
- Seit mehr als 10 Jahren erfolgreich als bewährtes Optiksystem

FEMTIS® M_{plus}^{toric}

HighTech zur präzisen Astigmatismuskorrektur

- Einfache Achsausrichtung der IOL
- Beidseitig mögliche Rotation nach Enklavation der Clip-Haptiken
- Maximale Rotationsstabilität

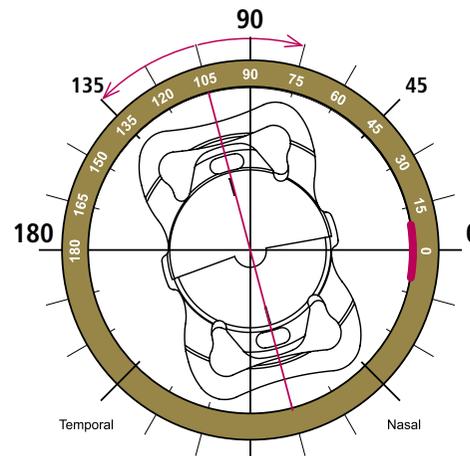

Web

Brandneu im Teleon IOL-Konfigurator

Berechnung der torischen **FEMTIS® Mplus Toric** - die neue varifokal-torische und rhexisfixierte IOL für Auto-CCC Anwendungen, wie FEMTO-Phako, zur Korrektur von Hornhautverkrümmung.

Außerdem können alle drei torischen **EDoF** IOL ganz einfach berechnet werden:

- **ACUNEX® Vario Toric**: Hydrophobe, glisteningfreie IOL mit Schlaufenhaptik
- **LENTIS® Comfort Toric**: Bewährte hydrophile Plattenhaptik
- **FEMTIS® Comfort Toric**: Rhexisfixierte IOL für Auto-CCC Anwendungen



www.teleon-toric.com



Toric Lens Configurator

Startseite
<<

LENTIS® | FEMTIS®

Bitte wählen Sie die gewünschte IOL

<p>LENTIS® <i>Tplus</i></p> <p>LS-313 T0-T6</p> 	<p>LENTIS® <i>Comfort toric</i></p> <p>LS-313 MF15 T0-T6</p> 	<p>LENTIS® <i>Mplus toric family</i></p> <p>LU-313 MFT</p> 
<p>LENTIS® <i>Tplus</i> X</p> <p>LU-313 T</p> 	<p>FEMTIS® <i>Comfort toric</i></p> <p>FB-313 MF15 T0-T3</p> 	<p>FEMTIS® <i>Mplus toric</i></p> <p>FB-313 MF30 T0-T3</p> 



Deutschland
Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Tel.: +49 (0)30 / 43 09 55 + 15

Germany
+49 (0)30 / 43 09 55 + 143
www.teleon-surgical.com

Produktvorstellung

ACUNEX[®] VARIO_{toric}

Die neue EDoF-IOL mit Astigmatismus Korrektur



Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Verschlechterung
des Sehens in allen
Entfernungen, wenn die
Hornhaut des Auges nicht
perfekt kugelförmig
geformt ist.

50%

der
Patienten
haben
keinen
Astigmatismus

SEHEINDRUCK
ohne
Hornhaut-
verkrümmung

E E

50%

der
Patienten
benötigen
Mehr

ACUNEX[®]
VARIO_{toric}

SEHEINDRUCK
mit
Hornhaut-
verkrümmung

E E

Mit der torischen EDoF-IOL ACUNEX[®] Vario Toric haben Sie die Möglichkeit, Astigmatismus im Zuge einer Kataraktbehandlung mühelos zu korrigieren. Standardzylinder T0 - T3 (0,75 dpt bis 3,00 dpt in 0,75 dpt Schritten) erhältlich.

Ein ganz besonderes Patientenvideo:



Der renommierte Augenchirurg Dr. med. Omid Kermani aus Köln implantierte die ACUNEX[®] Vario bei seinem eigenen Bruder, der ihm in diesem Video post-OP Rede & Antwort steht.



Produktvorstellung

LENSAR - Lasersystem

Das Optimum für Ihre Kataraktchirurgie

Höhere Effizienz und zufriedenerer Patienten:

Das speziell für die refraktive Kataraktchirurgie entwickelte LENSAR®-Lasersystem sorgt mit überlegener Technologie und hohem Automatisierungsgrad für effiziente, fehlerfreie Prozeduren und hervorragende OP-Ergebnisse auch bei Astigmatismus-Patienten.

Das LENSAR® Lasersystem verbindet die eigens entwickelte automatische Biometrie, erweiterte okulare Bildgebung und die Messtechnologie 3D-CSI (konfokal strukturierte Illumination) mit einem Advanced Ultra Short Pulse Laser.



[Mehr Infos zum LENSAR®-Lasersystem](#)

Produktvorstellung

sophi

Ein Phakosystem, das neue Maßstäbe setzt. Made in Switzerland.

Mit dem Sophi Phakosystem haben Sie ab sofort einen außergewöhnlich zuverlässigen Partner im OP, der zudem das Produktportfolio von Teleon Surgical in Deutschland perfekt abrundet.

Die Idee hinter Sophi: Mobilität, Ergonomie, Sicherheit.

Grundlage der Entwicklung waren die Anforderungen an ein optimales Phaco-System aus Sicht des Chirurgen, des Operationsteams und aller anderen Beteiligten. Das Ergebnis ist ein High-End Gerät, das neue Maßstäbe setzt.

Sophi ist nicht nur eine Weiterentwicklung der vorhandenen Technologie, sondern auch eine komplette Innovation. Sophi wurde mit dem Ziel entwickelt, die Arbeit von Augenärzten und dem gesamten Operationsteam einfacher, sicherer und effizienter zu gestalten.



[Mehr Infos zum Sophi Phakosystem](#)

Produktvorstellung

ZEPTO®

Erleben Sie die Vorteile der ZEPTO® Kapsulotomie


MIT ZEPTO® können Sie präzise, visuell zentrierte und stabile Kapsulotomien in Millisekunden durchführen.

ZEPTO® ist ein modernes Kapsulotomiesystem mit einem Einweghandstück samt funktionaler Spitze, die in Millisekunden eine stabile und kreisrunde Kapsulotomie erzeugt.

Die Spitze besteht aus einem kleinen, transparenten und weichen Silikonring, in dem sich das runde Nitinol-Kapsulotomie-Element befindet. Dieses wird mikrometergenau gefertigt, um eine gleichmässige 360-Grad-Kapseleröffnung zu erzielen.



Mehr Infos zu ZEPTO®

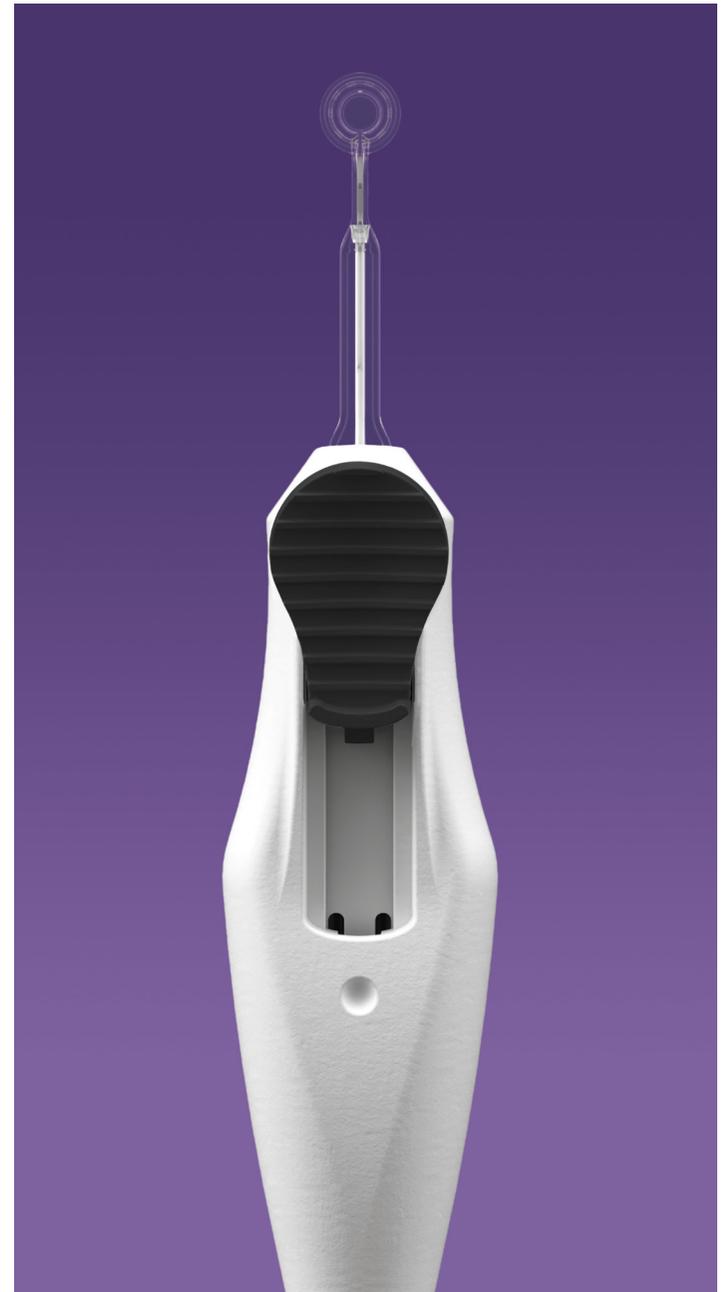

Produktvorstellung

tixel®

Strahlungsfreie Technologie für Augenlid- und periorbitale Behandlungen

Tixel® ist ein neuartiges, nicht ablatives System, das durch Novoxels patentierte Titan-Tip-Technologie unterstützt wird. Tixel® arbeitet mit direkter Hitze und ist strahlungsfrei.


WARUM TIXEL® | DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Behandlung und Reduzierung von periorbitalen Augenfältchen
- Sichere Behandlung der oberen und unteren Augenlider
- Strahlungsfreie Technologie – sicher für die Augen
- Kontrollierte direkte Erhitzung der Haut an den Augenlidern durch Wärmeleitung
- Präzise Erhitzung des Behandlungsorts
- Niedrigenergiebehandlung
- Sterile Titanspitzen verhindern Kreuzkontaminationen während der Behandlung
- Kurze Behandlungsdauer



Mehr Infos zu Tixel®

TELEON®

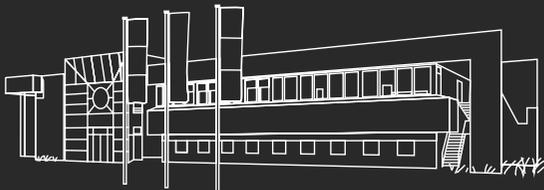

IMPRESSUM

Ausgabe: DOC Sommer 2021

Herausgeber:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Am Borsigturm 58, 13507 Berlin

Editor: Enrico Plessow

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
6956AV Spankeren
The Netherlands

E-Mail: marketing@teleon-surgical.com

Web: www.teleon-surgical.com