



Lente monopezzo per camera posteriore ad estesa profondità di fuoco ed elevata sensibilità al contrasto, superficie asferica e filtro luce blu

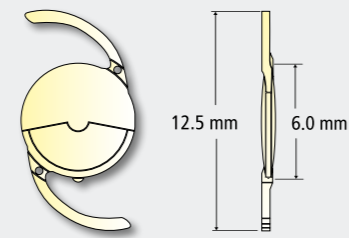

Prodotto	ACUNEX® VARIO AN6V	Asferica
		EDOF
		Filtro luce blu
		Glistening-free
Tipo	IOL EDOF monopezzo pieghevole per impianto nel sacco capsulare	
Diametro del corpo	6,0 mm	
Diametro totale	12,5 mm	
Angolazione dei supporti	0°	
Design ottico	Biconvesso Segmento visione da vicino a forma di settore - anteriore: +1,5 D Superficie asferica - posteriore Aberrazione sferica neutra	
Design IOL	Supporto C-loop	
Materiale	Acrilico idrofobico glistening free Assorbimento UV con filtro addizionale per luce blu	
Diottrie disponibili	da SE +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)	
Indice di rifrazione	1,54 @ 35°	
Costante A (nominale)	119,1	
Sterilizzazione	Raggi gamma	
Conservazione	Conservazione in soluzione salina 0,9 %	

Lente monopezzo torica per camera posteriore ad estesa profondità di fuoco ed elevata sensibilità al contrasto, superficie asferica e filtro luce blu

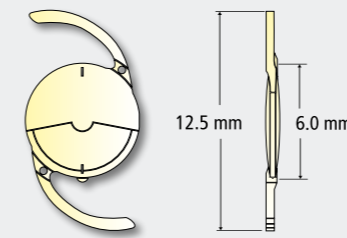

Prodotto	ACUNEX® VARIO TORIC AN6VTO-T3	Asferica
		EDOF
		Filtro luce blu
		Glistening-free
		Tonica standard
Tipo	IOL EDOF monopezzo torica pieghevole per impianto nel sacco capsulare	
Diametro del corpo	6,0 mm	
Diametro totale	12,5 mm	
Angolazione dei supporti	0°	
Design ottico	Biconvesso Segmento visione da vicino a forma di settore - anteriore: +1,5 D Superficie asferica e torica - posteriore Aberrazione sferica neutra	
Design IOL	Supporto C-loop	
Materiale	Acrilico idrofobico glistening-free Assorbimento UV con filtro addizionale per luce blu	
Diottrie disponibili	da SE +10,0 D a +30,0 D (0,5 D) cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D	
Indice di rifrazione	1,54 @ 35°	
Costante A (nominale)	119,1	
Sterilizzazione	Raggi gamma	
Conservazione	Conservazione in soluzione salina 0,9 %	

IL NUOVO STANDARD D'ECCELLENZA PER TUTTI

VANTAGGI DI ACUNEX® VARIO

- Maggiore **soddisfazione del paziente**
- Più **indipendenza dagli occhiali** per una qualità della vita migliore
- Eccellente **sensibilità al contrasto**
- Biomateriale certificato da **FDA**

PRODUTTORE:

TELEON


Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
NL- 6956 AV Spankeren

marketing@teleon-surgical.com
www.teleon-surgical.com

REVISIONE: 0F2186V3

BRILLANTEZZA ESCLUSIVA

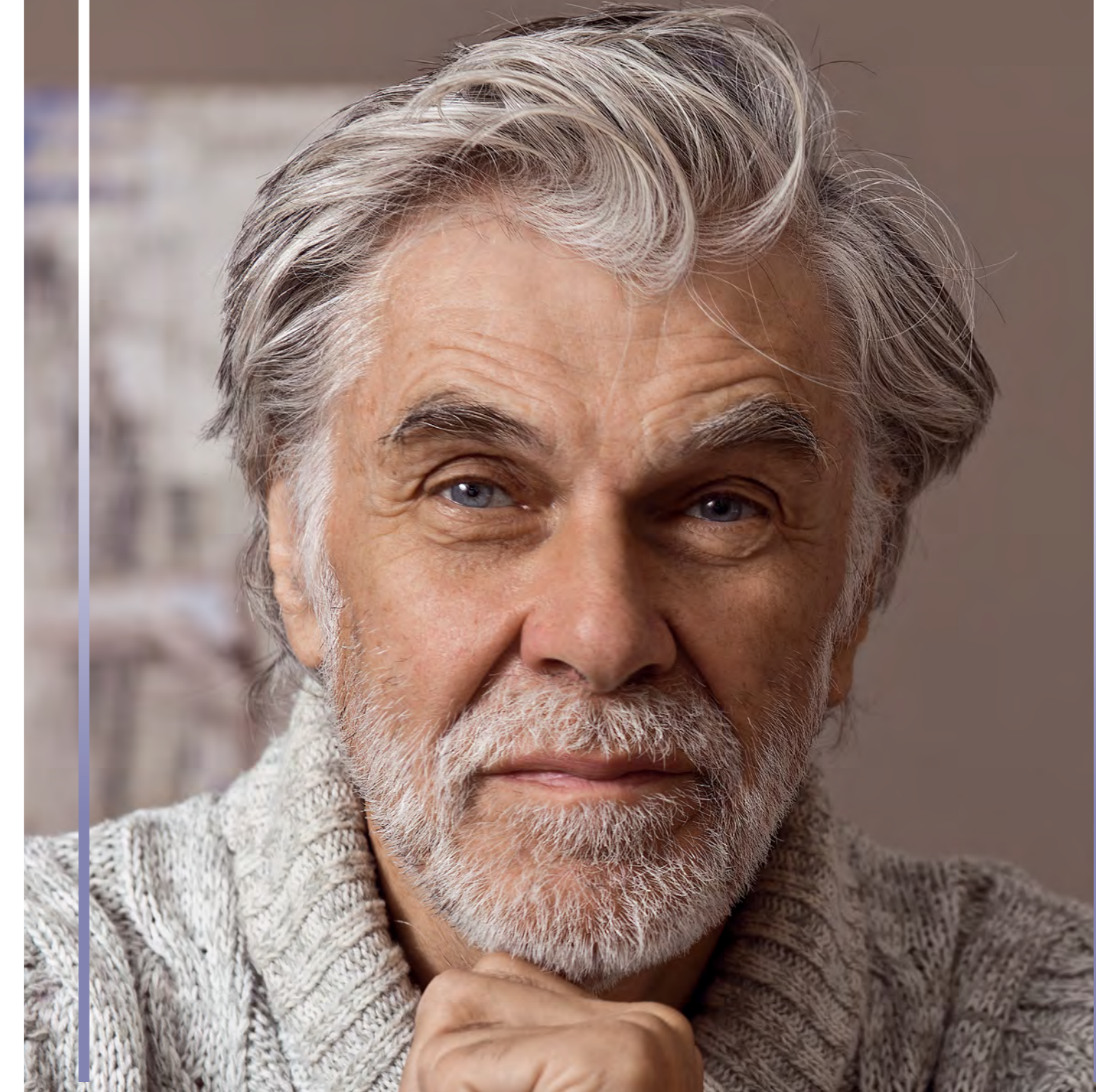

ACUNEX® VARIO e
ACUNEX® VARIO_{toric}

LA IOL **EDOF** PER OGNI PAZIENTE

ACUNEX® VARIO

DESIGN OTTICO ESCLUSIVO PER UNA VISIONE BRILLANTE

TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE CONTINUA

Comfort visivo esteso per una visione a distanza brillante con vero range intermedio (vera potenza EDOF „varifocale“)


OTTICA SEGMENTATA AVANZATA

Successo dell'idea comprovato da oltre 800.000 impianti




AUMENTO SIGNIFICATIVO DELLA VISIONE

rispetto al trattamento monofocale standard

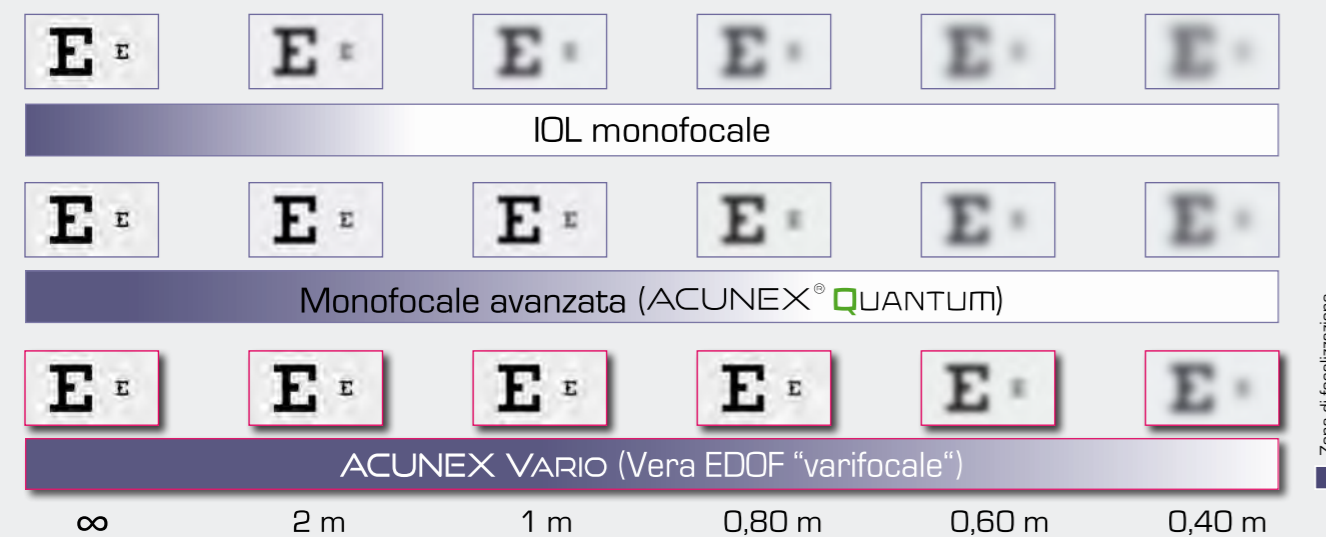


EFFETTI FOTICI COLLATERALI MINIMI

Elevatissima sicurezza di tutti i sistemi ottici EDOF

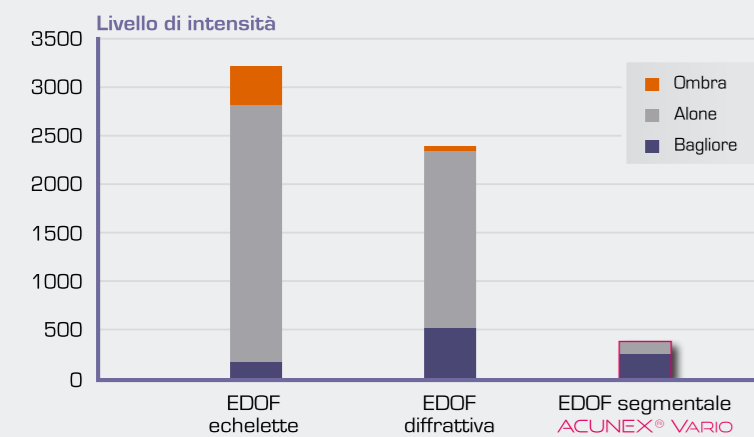


Fonte: ESCRS Presentazione 2018, Dr. P. Versace.


VARIFOCALITÀ A DISTANZA DI LETTURA***

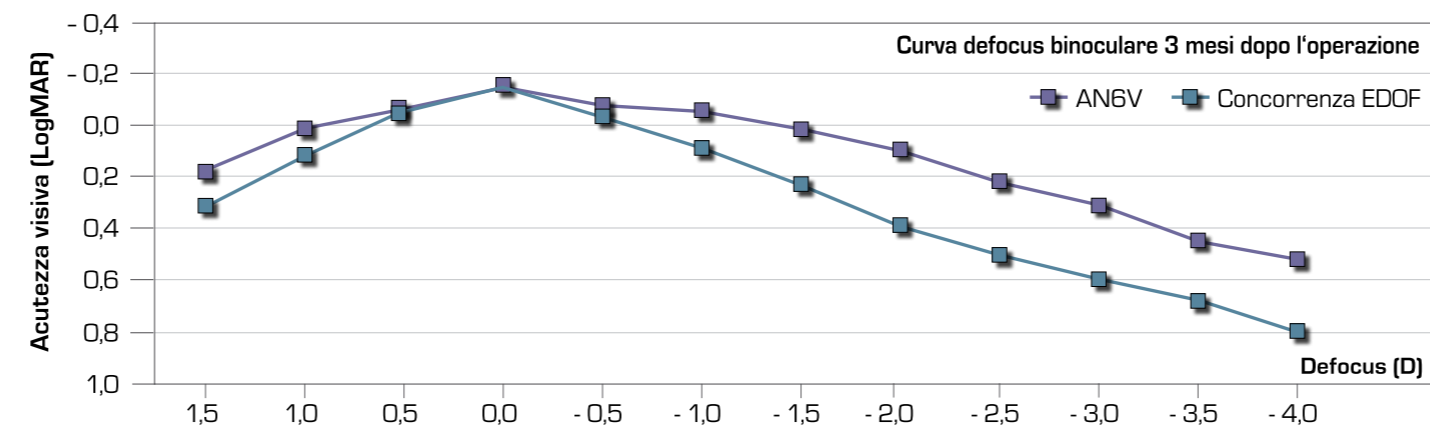


OTTIMA SENSIBILITÀ AL CONTRASTO***

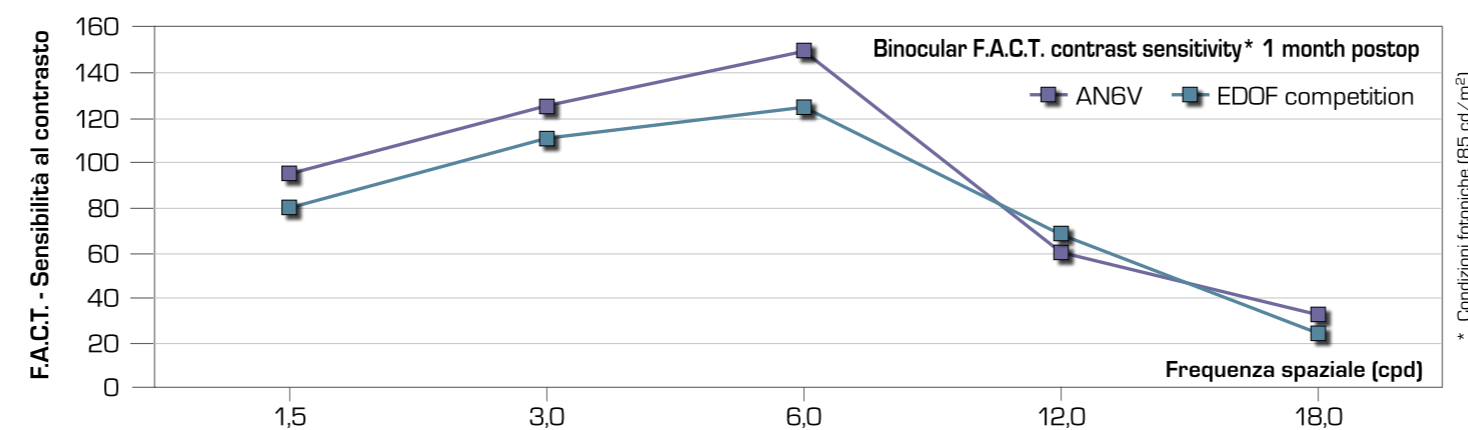


ECCELLENTE STABILITÀ RIFRATTIVA****

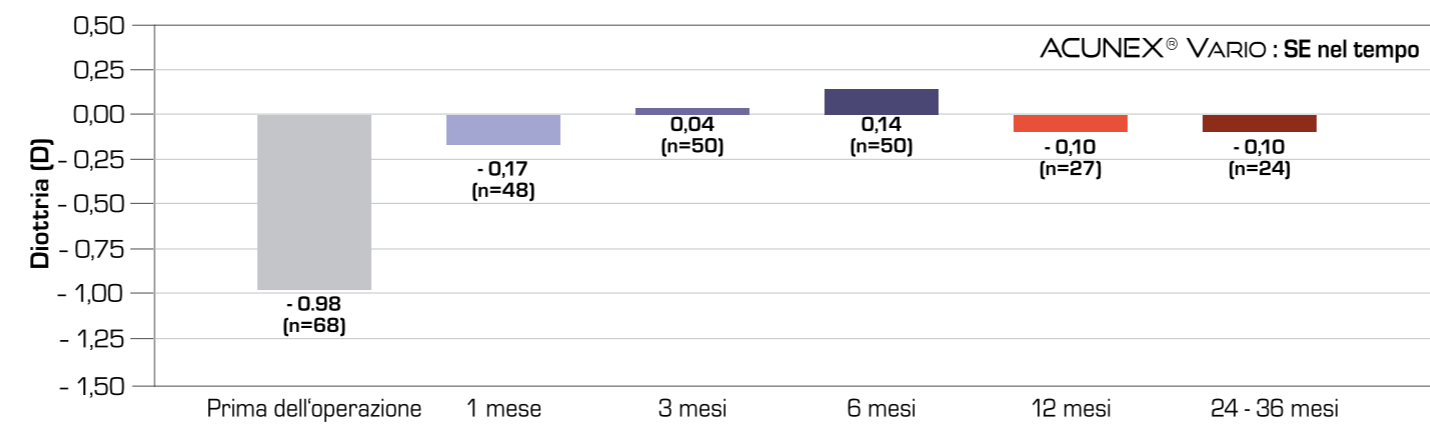


Indipendenza dagli occhiali, distanza ravvicinata (n=42)**

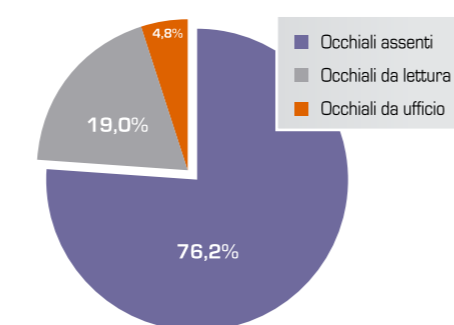

Fenomeni visivi (n=334)** (bagliore, alone, starburst, immagini sdoppiate)

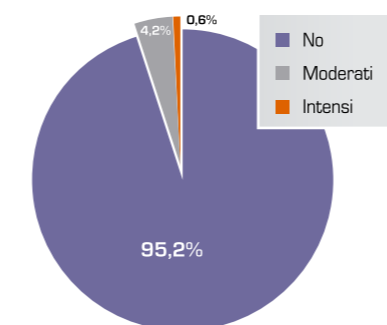


Qualità di visione (n=168)** (A distanza lontana e intermedia)

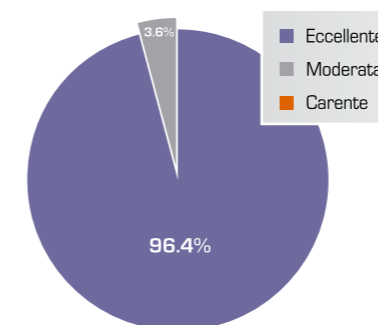

** Dati di archivio basati su studi ACUNEX® Vario **** DOI: 10.3205/22dgi37 DGII 2022 Prof. Bertelmann ***** DOF 2022 Dr. Kretz

ACUNEX® VARIO^{toric}

CON CORREZIONE DELL'ASTIGMATISMO

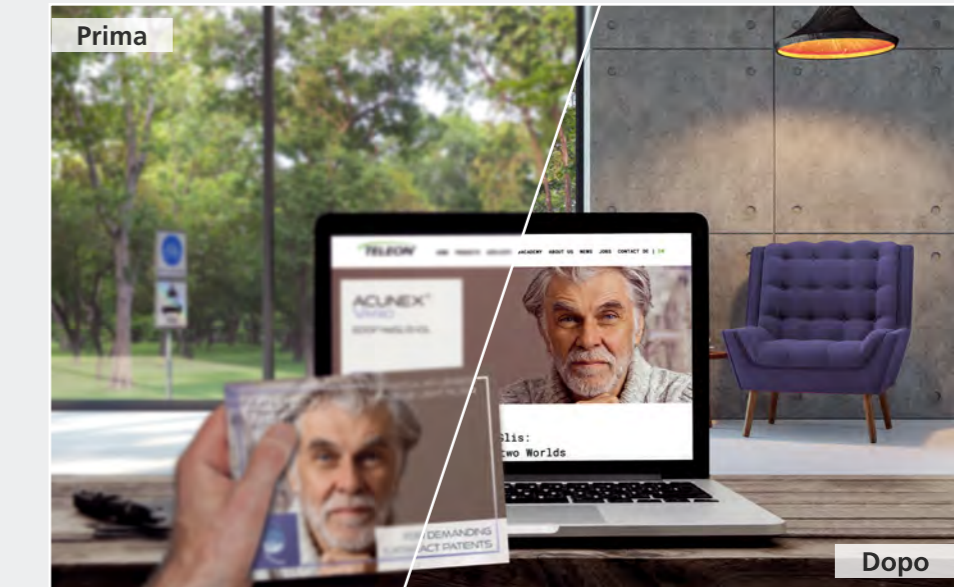

ASTIGMATISMO
Visione compromessa a tutte le distanze, a causa della curvatura irregolare della cornea.


50% dei pazienti non presenta astigmatismo

VISIONE senza astigmatismo



L'altro **50%** dei pazienti necessita di più

VISIONE con astigmatismo

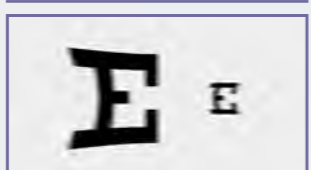

ACUNEX® VARIO^{toric}

ACUNEX® VARIO^{toric} è la IOL EDOF perfetta per correggere l'astigmatismo. Disponibile con cilindri standard compresi tra 0,75 D e 3,00 D in incrementi di 0,75 D.

