


EINZIGARTIG BRILLANT

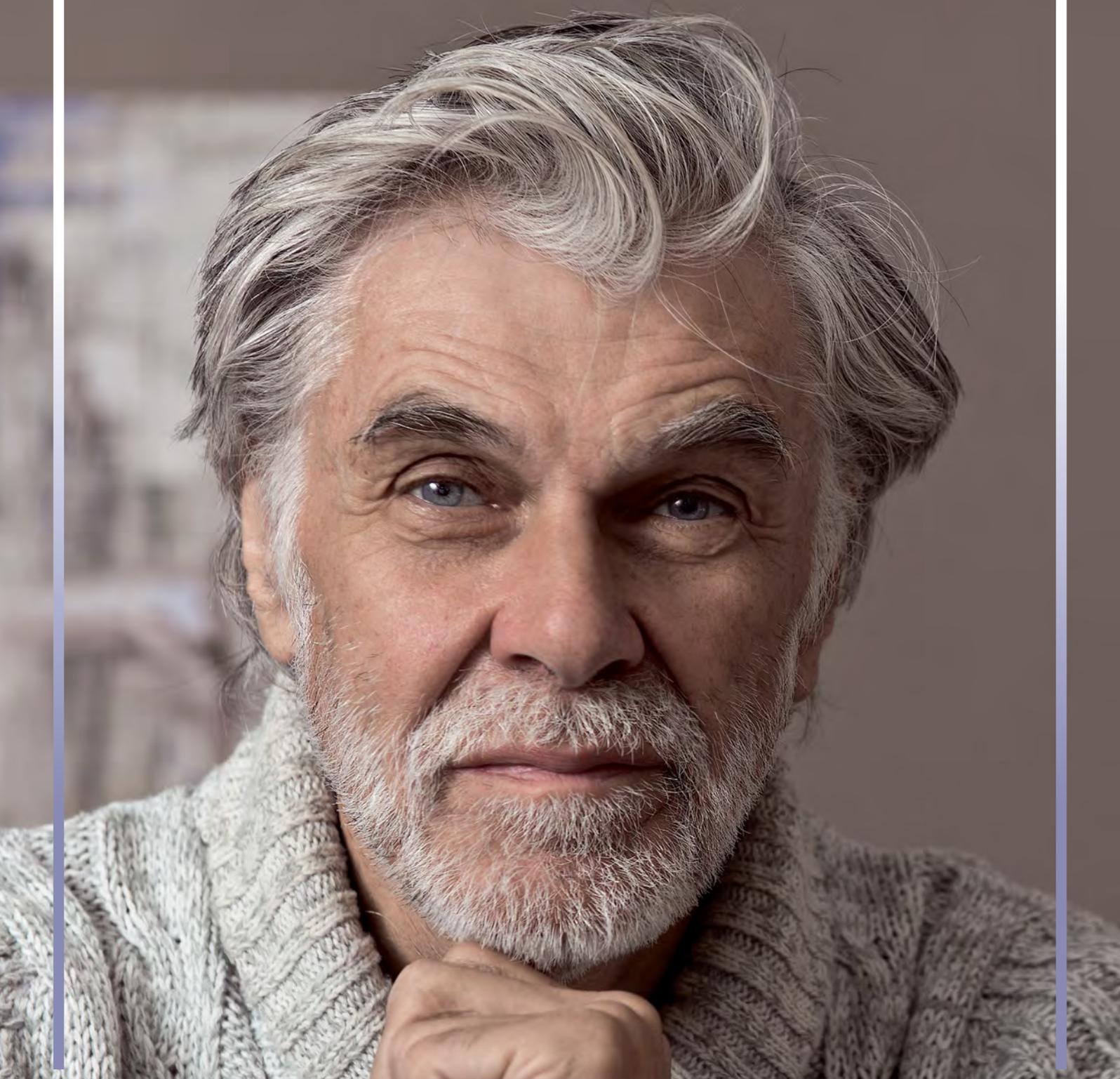

ACUNEX[®] VARIO &
ACUNEX[®] VARIO_{toric}

DIE **EDOF**-IOL FÜR JEDEN PATIENTEN

ACUNEX[®] VARIO

BRILLANTES SEHEN DANK EINZIGARTIGER OPTIK

CONTINUOUS TRANSMISSION TECHNOLOGY

Erweiterter Sehkomfort für brillante Fernsicht mit echtem Zwischenbereich (true „varifocal“ EDOF-Power)


WEITERENTWICKELTE SEGMENTOPTIK

Bewährtes Erfolgskonzept mit 800.000 erfolgreichen Implantationen





WESENTLICH MEHR SEHEN

als mit einer monofokalen Standardversorgung

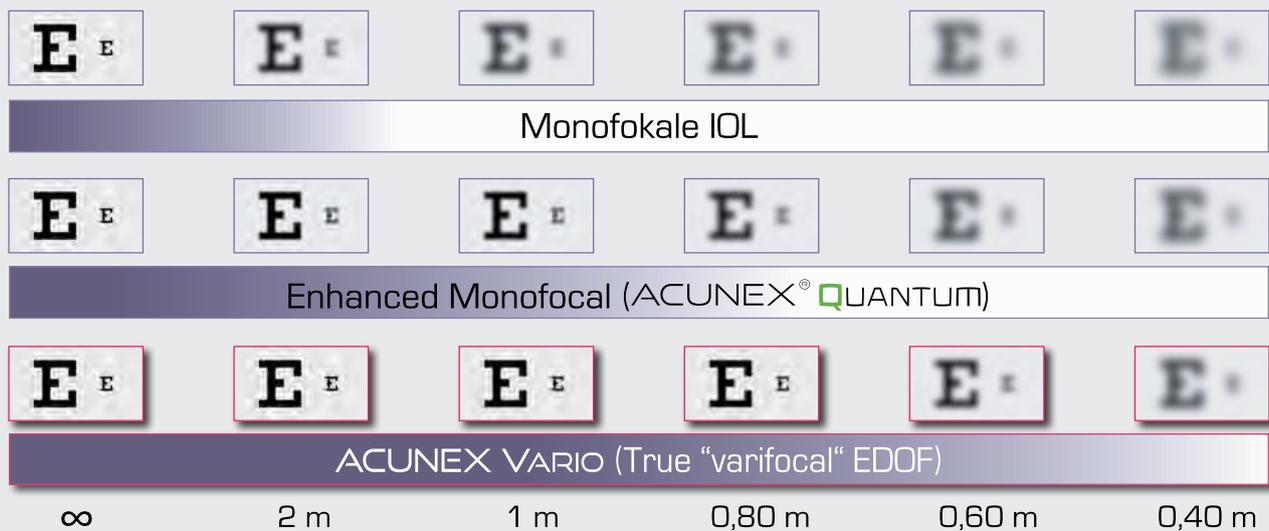


KEINE UNGEWOLLTEN NEBENEFFEKTE

Höchste Sicherheit aller EDOF-Optiksysteme

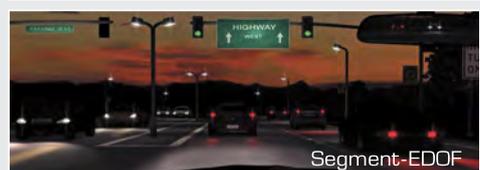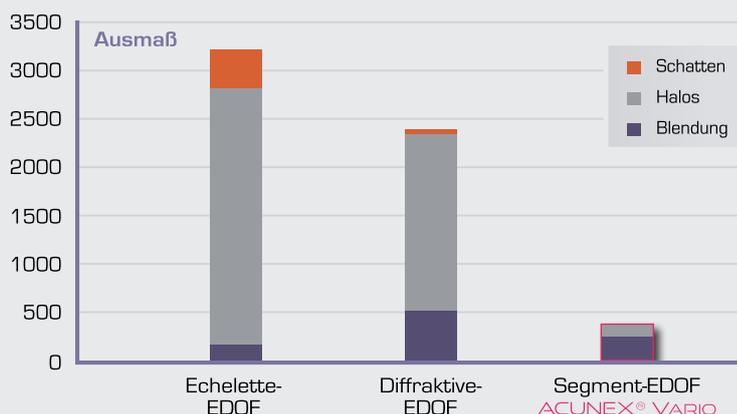


Quelle: ESCRS Präsentation 2018, Dr. P. Versace,


VARIFOKALITÄT BIS IN DEN NAHBEREICH***

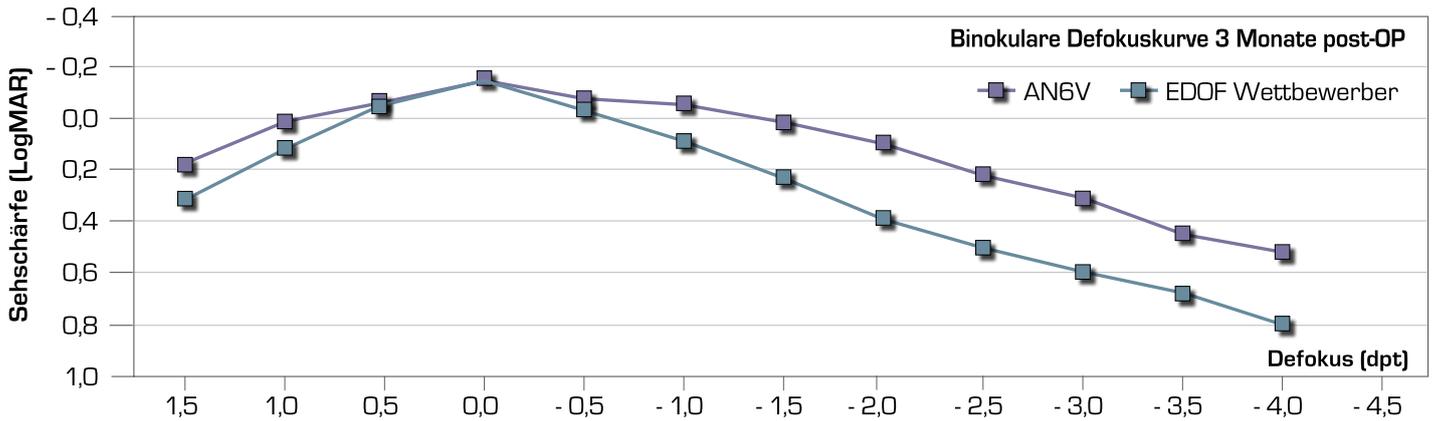


SEHR GUTES KONTRASTSEHEN***

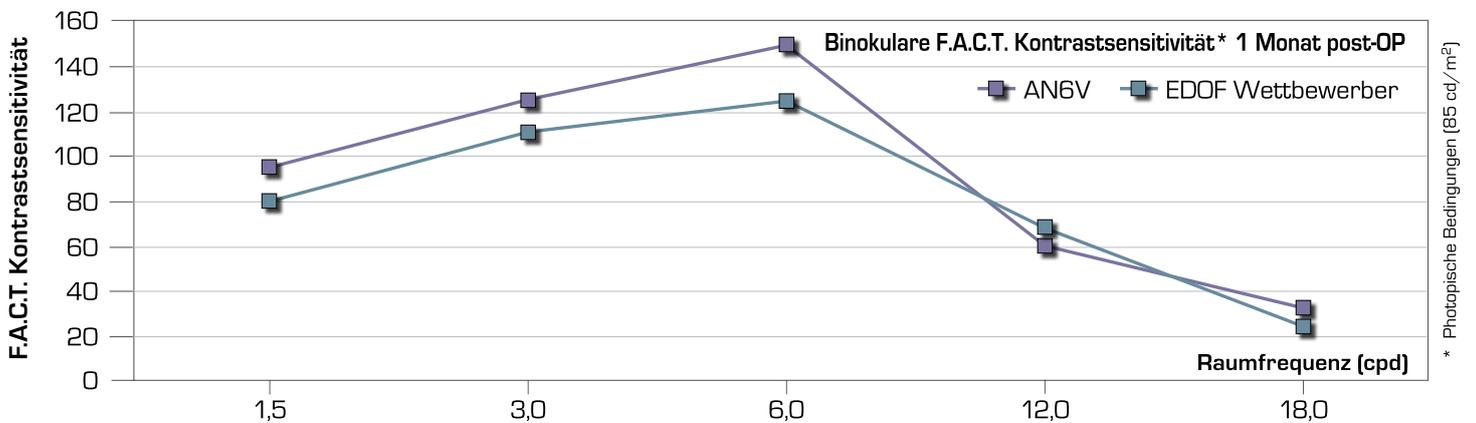


AUSGEZEICHNETE REFRAKTIVE STABILITÄT****

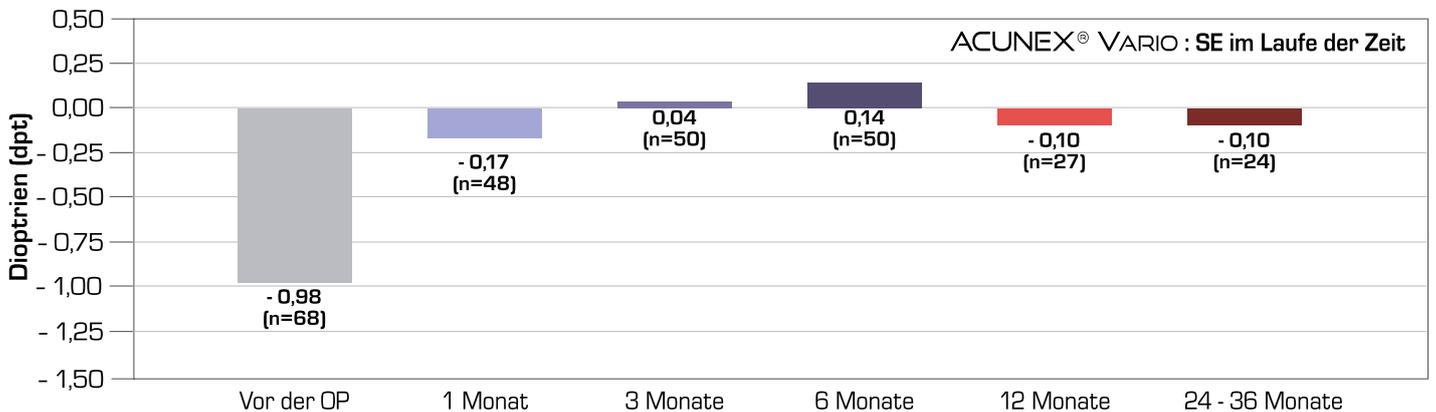


Brillenunabhängigkeit Nähe (n=42)**

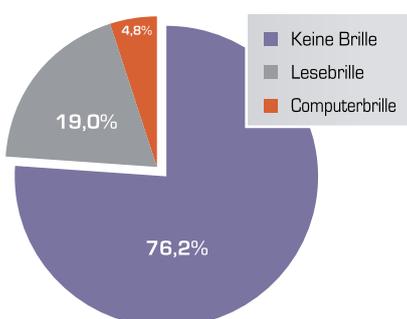


Nebenwirkungen (n=334)** [Blendung, Halos, Strahlenkränze, Doppelbilder]

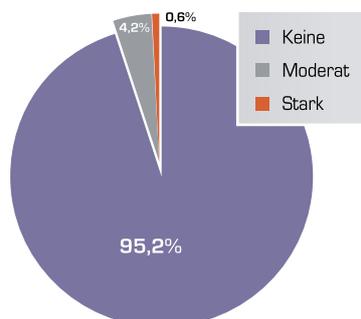

Sehqualität (n=168)** [Ferne und Zwischenbereich]

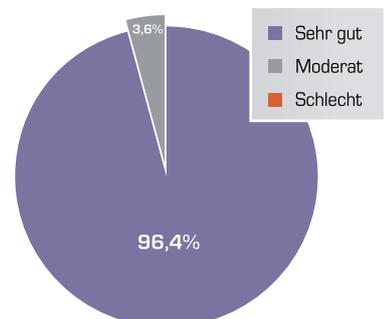

ACUNEX[®] VARIO_{toric} MIT ASTIGMATISMUS KORREKTUR

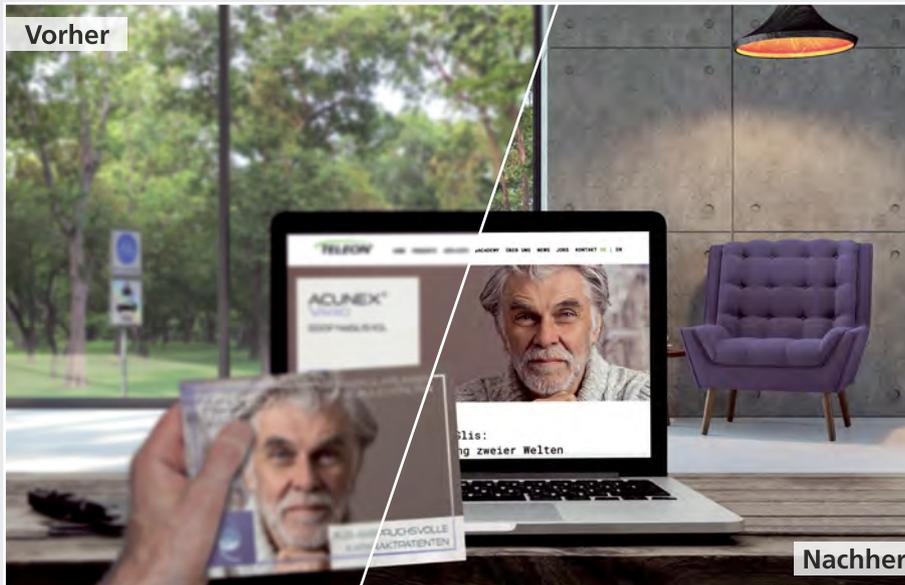

HORNHAUT- VERKRÜMMUNG (ASTIGMATISMUS)

Verschlechterung
des Sehens in allen
Entfernungen, wenn
die Hornhaut des
Auges nicht perfekt
kugelförmig geformt ist.

50%
der
Patienten
haben
keinen
Astigmatismus

SEHEINDRUCK
ohne
Hornhaut-
verkrümmung



50%
der
Patienten
benötigen
mehr


ACUNEX[®]
VARIO_{toric}

SEHEINDRUCK
mit
Hornhaut-
verkrümmung



Mit der torischen EDOF-IOL ACUNEX[®] VARIO_{toric}
haben Sie die Möglichkeit Astigmatismus im
Zuge einer Kataraktbehandlung mühelos zu korrigieren.
Standardzylinder T0 - T3
(0,75 dpt bis 3,00 dpt in 0,75 dpt Schritten) erhältlich.

Einteilige Hinterkammerlinse für erweiterte
Tiefenschärfe und optimales Kontrastsehen mit
asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter

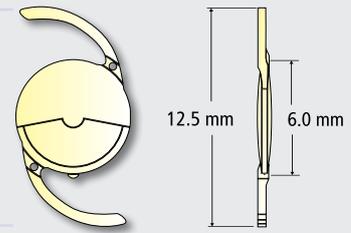


Produkt	ACUNEX® VARIO AN6V	Asphärisch
		EDOF
Typ	Faltbare einteilige EDOF-IOL zur Kapselsackfixierung	Blaulichtfilter
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Glistening-frei
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	
Haptikanwinkelung	0°	
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +1,5 dpt Asphärische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 dpt bis +30,0 dpt (0,5 dpt)	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gammabestrahlung	
Lagerung	Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	

DER NEUE PREMIUM-STANDARD FÜR ALLE

VORTEILE DER ACUNEX® VARIO

- Höhere **Patientenzufriedenheit**
- Mehr **Brillenfreiheit** für mehr Lebensqualität
- Exzellente **Kontrastsicht**
- Sicheres **FDA** zertifiziertes Bio-Material

Einteilige torische Hinterkammerlinse für erweiterte Tiefenschärfe und optimales Kontrastsehen mit asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter

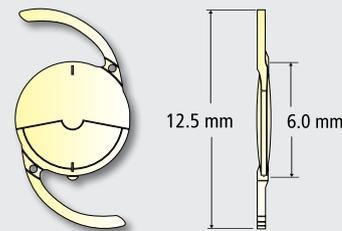

Produkt	ACUNEX® VARIO TORIC ANGVTO-T3	Asphärisch
		EDOF
Typ	Faltbare einteilige torische EDOF-IOL zur Kapselsackfixierung	Blaulichtfilter
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Glistening-frei
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	Standard-torisch
Haptikanwinkelung	0°	
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +1,5 dpt Asphärische und torische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 dpt bis +30,0 dpt (0,5 dpt) zyl.: T0 +0,75 dpt T1 +1,5 dpt T2 +2,25 dpt T3 +3,0 dpt	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gammabestrahlung	
Lagerung	Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	

HERSTELLER:

TELEON®

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
NL- 6956 AV Spankeren

✉ marketing@teleon-surgical.com
🌐 www.teleon-surgical.com